

TEAC

ワイヤレス生体計測装置 Polymate Mini AP108

基礎医学研究用機器

<http://www.teac.co.jp/>

ポリメイトに待望の小型ワイヤレスモデルが登場

 **Bluetooth®**

8アクティブ電極 外部2ch入力 約80g

サンプリング周波数500/1000Hz

連続計測 4時間以上

**Bluetooth® による計測条件設定
リアルタイムモニター・収録が可能。**

ポリメイトミニ AP108は、本体に生体アンプとBluetooth®を内蔵したワイヤレス生体計測装置です。携帯できるよう小型・軽量化を図り、脳波、筋電図、心電図、眼球運動などの生体信号をBluetooth®経由でPCにリアルタイムモニター・収録することが可能です。内部電池で4時間以上の連続収録ができます。



基礎医学研究からスポーツ医学・人間工学研究まで幅広くご利用いただける、ウェアラブルな生体計測装置。

技術監修:  独立行政法人情報通信研究機構

開発製造元: 株式会社 デジテックス研究所



● 小型・軽量

サイズは 約 W52 x D50 x H20 mm
約 80 g

● サンプル周波数 500/1000Hz

20bit A/D コンバータ採用。
1000Hz 設定時は6 電極入力
(外部入力 ON の場合は4 電極入力)

● Bluetooth® を内蔵

最大10m 離れた場所から計測条件設定、
リアルタイムモニター・収録。
(環境により到達距離は変わります。)

● 小型アクティブ電極を採用

電極材に金を採用。電極近傍にインピーダンス変換回路
を設けることで、耐環境性に優れた生体計測を実現。




● 連続動作 4 時間以上 (内部電池使用時)

● ポリメイトシリーズの使い勝手を踏襲

モニター ソフトは 定評ある AP Monitor の使い勝手を踏襲。

● 日本睡眠学会 PSG 共通フォーマットを採用


波形表示や解析ソフトもポリメイトシリーズ同様に使用可能。

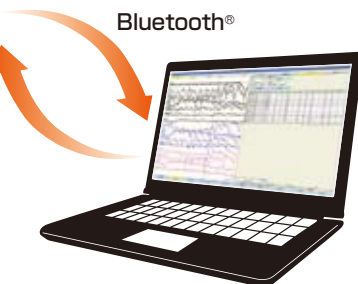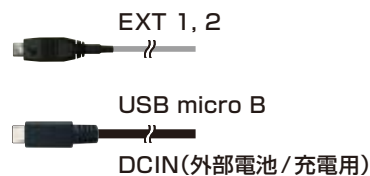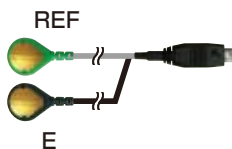

付属ソフトウェア

モニター・計測条件設定や計測中の波形表示モニターができる
計測ソフトウェアが標準付属です。

計測ソフトウェア Mobile Acquisition Monitor

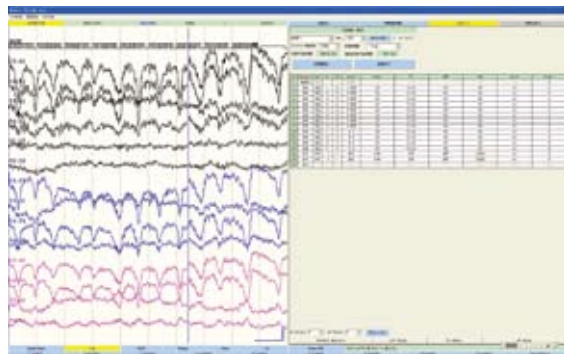

- モニタージュ設定 16パターン記憶
- 収録条件設定
- 電極抵抗測定
- 被験者情報入力
- リアルタイム波形表示
- Bluetooth® 無線設定



技術監修： 独立行政法人情報通信研究機構

開発製造元：株式会社 デジテックス研究所

ポリメイト ミニ [AP108] 本体仕様

測定収録部	
電極 [数]	多用途 [8]、外部 [2]、REF [1]、E [1] (多用途、REFはアクティブ電極)
チャンネル数	16
入力インピーダンス	アクティブ電極 300GΩ
A/D変換器	20bit
サンプリング周波数	500 / 1000Hz
収録フォーマット	日本睡眠学会PSG共通フォーマット
電極インピーダンス測定	絶対値表示 及び 良否判定表示 (アース加算法)

一般	
外形寸法・質量	約W52 x D50 x H20 mm、約80 g (内部電池含む)
電源	内部：充電式リチウムイオン電池 外部：DC5V (内部電池充電兼用)
消費電力	0.1VA以下
連続使用時間	4時間以上 (内部電池使用時)

付属品	個別仕様	数量	個別型番
小型ACT生体電極(D)	1.5m	× 8	
REF/アース電極	4極角コネクター	× 1	AP-C153-015
外部入力変換コード	4極角コネクター	× 1	BA-C401-015
無線アダプター	Bluetooth® V3.0 + EDR Class2 準拠		
充電コード	USBケーブル	× 1	
付属ソフトウェア		× 1	Mobile Acquisition Monitor
取扱説明書	CD供給	× 1	
保証書		× 1	

奨励動作環境	ノート型パソコン	DOS/V互換機上のWindows 環境
使用OS	Windows 7 (32/64bit)	
CPU	1GHz 以上	
メモリー	1GB以上	
表示分解能	1024 × 768 以上	
HDD空き容量	2GB 以上	
Bluetooth®	内蔵 Bluetooth® を推奨	



* 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
* 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

* 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
* Bluetooth® のワードマーク および ロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ティアック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
* Microsoft および Windows 7 は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
* その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ティアック株式会社

<http://www.teac.co.jp/>

情報機器事業部 計測営業課

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185

名古屋営業所 〒510-0821 三重県四日市市 TEL 059-359-7355 FAX 059-359-7366
営業 1 係 久保田2-3-18

● 技術的なお問い合わせ CSグループ TEL 042-356-9161 FAX 042-356-9185
受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)